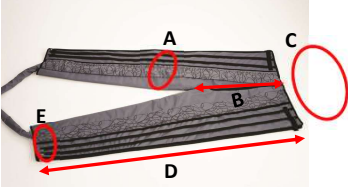
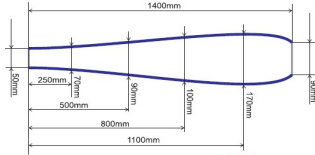
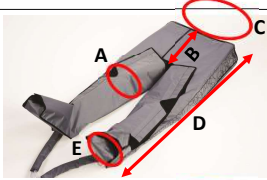
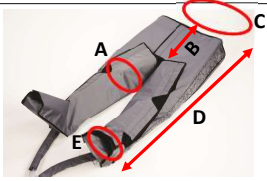
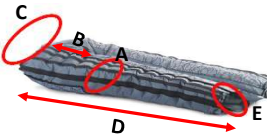

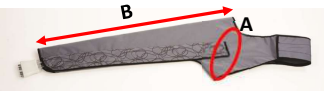


Spécifications des applicateurs Lymphastim

Numéro de commande	Nom	Dimensions	Image	Avantages	Désavantage
P6000.060 P6000.061	Pantalon à 24 chambres Pantalon à 12 chambres	A: circonférence min/max de la cuisse : 66-76 cm B: longueur de l'entrejambe : 47 cm C: circonférence min/max de la ceinture : 100-132 cm D: longueur totale : 146 cm E: circonférence min/max de la cheville : 44-54 cm		Applicateur de pantalon taille unique - convient aux patients de différentes tailles et poids. Recommandé pour une utilisation fréquente.	La partie de la cheville n'est pas aussi ergonomique que celle des autres pantalons Lymphastim.
P6000.068 P6000.069 P6000.070	Bande d'extension pour applicateurs de jambes - taille M, S (P6000.066, P6000.062, P6000.076, P6000.077) Bande d'extension pour applicateurs de jambes - taille L (P6000.067, P6000.063) Bande d'extension pour applicateurs de pantalons (P6000.060, P6000.061)			Volume de l'applicateur pouvant aller jusqu'à +17 cm.	La bande d'extension ne se gonfle pas.
P6000.059	Pantalon à 24 chambres avec attaches Velcro.	A : circonférence min/max de la cuisse : 70-84 cm B : longueur de l'entrejambe : 37 cm C : circonférence min/max de la ceinture : 90-144 cm D : longueur totale : 111 cm E : volume max. de la partie cheville : 50 cm		Les pantalons Lymphastim les plus ergonomiques sur le marché. Le Velcro permet d'adapter cet applicateur aux patients de différentes corpulences - vous n'avez pas besoin de bandes d'extension.	Même le Velcro de haute qualité s'use avec le temps. La manipulation du Velcro est plus compliquée comparée à une fermeture éclair. Lorsque le Velcro est utilisé pour des patients de grande taille ou sous une forte pression, il peut commencer à se desserrer.
P6000.071	Pantalon à 24 chambres avec Velcro - taille XL	A : circonférence min/max de la cuisse : 80-90 cm B : longueur de l'entrejambe : 37 cm C : circonférence min/max de la ceinture : 110-150 cm D : longueur totale : 111 cm E : volume max. de la partie cheville : 50 cm		Pour les patients de très grande taille.	Ne convient pas aux patients de plus petite taille.
P6000.072	Pantalon à 24 chambres avec fermeture éclair	A : circonférence min/max de la cuisse : 80-90 cm B : longueur de l'entrejambe : 37 cm C : circonférence min/max de la ceinture : 110-150 cm D : longueur totale : 111 cm E : volume max. de la partie cheville : 50 cm		Ergonomique et facile à utiliser. Excellente combinaison entre une forme ergonomique et une fermeture éclair.	Pas flexible en termes de taille (volume) - pour un patient de grande taille, vous devez utiliser une bande d'extension.
P6000.067 P6000.063 P6000.066 P6000.062 P6000.076 P6000.077	Jambe à 10 chambres - taille L Jambe à 6 chambres - taille L Jambe à 10 chambres - taille M Jambe à 6 chambres - taille M Jambe à 10 chambres - taille P Jambe à 6 chambres - taille P	Taille L : A : circonférence de la cuisse : 76 cm B : longueur totale : 94 cm Taille M : A : circonférence de la cuisse : 70 cm B : longueur totale : 78 cm Taille P : A : circonférence de la cuisse : 63 cm B : longueur totale : 78 cm		Conçu pour être ergonomique et facile à utiliser, il offre une excellente combinaison de forme ergonomique et de fermeture éclair.	Pas flexible en termes de taille (volume) - pour un patient de grande taille, vous devez utiliser une bande d'extension.
P6000.065 P6000.064 P6000.075 P6000.074	Bras à 8 chambres - taille unique Bras à 6 chambres - taille unique Bras à 8 chambres - taille P Bras à 6 chambres - taille P	Taille unique : A : circonférence du dessous de bras : 45-50 cm B : longueur totale : 100 cm Taille P : A : circonférence du dessous de bras : 45-50 cm B : longueur totale : 88 cm		Plus d'espace au niveau de la poitrine. Fermeture Velcro - flexible en termes de tailles. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le Velcro très souvent.	
P6000.034	Interface pour 2 bras ou 2 jambes - gris (nécessaire lors de l'utilisation de 2 applicateurs pour bras ou 2 applicateurs pour jambes ensemble)		